

クイック抗体

ユーロフィンジェノミクス株式会社は、株式会社ホクドーと提携し、抗体作製に必要な抗原のペプチド合成(ペプチド合成超速プラン)とウサギへの28日短縮法による免疫を組み合わせることにより、ポリクローナル抗体を最短わずか2か月でお届けするサービスを開始しました。

本プランは、ペプチド合成から動物への免疫、抗体産生までを全て日本国内で行っており、また、免疫施設は日本実験動物協会に認証された施設で行っております。

ぜひ、クイック抗体をお試しください！



	ユーロフィンジェノミクス eurofins Genomics	株式会社ホクドー HoKudō
抗原予測	● (無償)	
抗原ペプチド合成	● (超速サービス)	
コンジュゲーション	●	
動物免疫		● (28日法)
全採血		●

サービスの比較

	クイック抗体	バリュー抗体
特長	抗原作製から全採血までが最短！	¥63,000～抗体作製可能
納期	最短! 2か月納品	3か月～
抗原ペプチド設計	有(無償)	有(無償)
抗原の種類	合成ペプチド (超速サービス)	合成ペプチド 持ち込み抗原
抗原投与	2回	4回
免疫期間	28日	49日
外部認証	日本実験動物協会	なし

価格

免疫頭数	参考価格(税別)
ウサギ 2羽	¥300,000
ウサギ 1羽	¥260,000

・左記価格には抗原部位予測、ペプチド抗原作製、コンジュゲーション、動物免疫、全採血全てのステップを含みます
 ・各ステップの途中でのキャンセルはできません
 ・抗原によっては抗体価が十分に上がらない場合がございます

ペプチド超速プラン



Genomics

ユーロフィンジェノミクス株式会社では、目的のペプチドを最短で7営業日で納品可能な超速サービスを行っております。クイック抗体プランでは、この超速サービスを利用し、抗原となるペプチドを合成します。



超速サービスの詳細は右のQRコードよりご確認ください。

項目	クイック抗体用 超速サービス
合成手法	Fmoc 固相合成法
標準品質保証データ	HPLCデータおよびマスペクトルデータ
アミノ酸数	~20 AA
精製純度	>80% HPLC
合成量	6 mg
コンジュゲーション	KLHもしくはBSA

バリュー抗体



Genomics

バリュー抗体プランは、抗体作製に必要なステップが全て含まれた、安価でお手軽なパッケージプランです。詳細は右のQRコードよりご確認ください。



価格: ¥63,000 ~



免疫28日短縮法



株式会社ホクドーでは、ポリクローナル抗体を迅速に入手するため、動物への免疫を28日で完了する技術を有しています。クイック抗体プランでは本技術を用いて抗体作製を行います。


Day	0	7	14	21	28	35
採血	▲			▲	★	
投与						
報告納品						
				中間報告		最終報告

よくある質問

Q. 動物への免疫が28日と短いですが抗体価は問題ありませんか？

A. 株式会社ホクドーが提供する免疫28日短縮法では、右図のように28日法においてもペプチド抗原で抗体価が上昇していることがELISAで確認されています。なお、21日目で試採血した抗血清のELISA結果をみて、追加で免疫することも可能です。(抗体価が規定に達していない場合には2回まで無償)

* 抗血清 6,400 倍希釈時に吸光度 1.0 未満の場合に限る

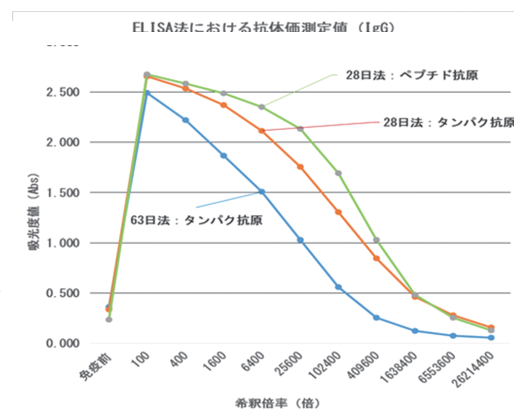

代理店



抗体サービスの詳細についてはQRコードを参照ください

ユーロフィンジェノミクス株式会社
抗体作製サービス部門

TEL: 03-6631-0103

E mail: Antibody-jp@eurofins.com