


ご注文の流れ

※ご注文にはアカウントの登録が必要です。

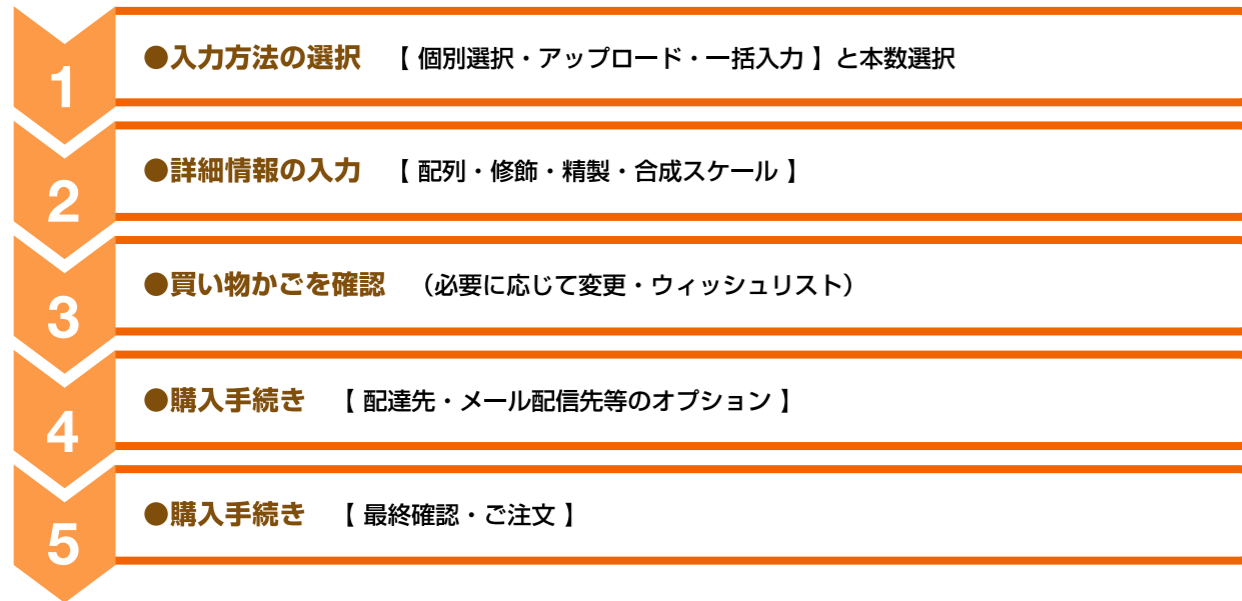

ご注文方法

Webより必要事項をご記入の上お申し込みください。

※RNA合成、ストックオリゴ、HTSオリゴはオーダーフォーム添付でのEメール注文となります。

eurofinsgenomics.jp ▶ オリゴDNA合成サービス ▶ [ご注文スタートページ](#)

お見積り・お問い合わせ

ご不明点がありましたらお気軽に下記までお問合せください。

〈オリゴDNA保存方法〉

- 乾燥したオリゴDNAは透明なフィルム状あるいはベレット状となり、輸送途中で蓋や壁面に付着する場合があります。目視での確認が困難な場合もございますので、開封前には必ず10秒間程度スピンドウンをしてからご使用下さい。
- 長期間(6ヶ月から1年程度)保存する場合は、乾燥状態で-20℃保存を推奨しております。
- 溶媒に希釈した場合、凍結融解の繰り返しにより物理的な分解を受ける可能性があります。凍結融解によるダメージを防ぐため、分注してから保存して下さい。
- オリゴDNAは脱イオン交換水(弱酸性を示す)等で速やかに分解される可能性がありますので、弱アルカリ性バッファー(TEpH8.0等)にて溶解をお願い致します。
※但し、Cy3、Cy3.5、Cy5、Cy5.5蛍光修飾オリゴDNAの場合、弱アルカリ性バッファーで分解される可能性がありますので、pH7.0もバッファーにて溶解をお願い致します。詳しくはweb上にてお確かめ下さい。
- 蛍光修飾カスタムDNAは退色をさけるため、遮光した-20℃の冷蔵所にて保存下さい。

●お問い合わせ●

ユーロフィンジェノミクス株式会社
営業部

〒143-0006 東京都大田区平和島 4-1-23 JSプログレビル9F
TEL:03-6701-8080

E-mail : sales-jp@eurofins.com

代理店



Genomics

オリゴDNA合成サービス

かんたん注文、スピード納品、高品質オリゴ

qPCR probes
PCR primer

Custom DNA & RNA Oligo

MGB probe

Oligos in 96well Plates

Quick Delivery PCRReady



オリゴDNA合成サービス

プライマー合成から幅広いオリゴ合成、プローブ合成まで。簡単Webオーダーと迅速なお届けサービス。

EXPERIENCE THE POWER OF DNA.

PCReady™ プライマー

一般的なPCRやDNAシーケンスプライマーにご利用いただけるサービス仕様が規格化された定額オリゴDNA合成です。

(税込) 定額 **¥968**/本
(税別 ¥880)

最短
翌日お届け*

土曜日受注
OK**

* 平日 17時までのご注文 (関東・北陸・近畿・中国・四国・九州地区は19時までOK)
** 17時までのご注文について月曜日(祝日の場合は翌営業日)にお届け。

- 鎖長6~35base のオリゴDNA合成に対応、OPC精製済み。
 - 最低保証収量 > 1 OD (10base未満の場合は > 0.5 OD)。
 - チューブでお届け。溶液 (50μM in TEバッファー濃度調整済み)。
- ※ 各種修飾品は受付けておりませんのでご注意ください。

スタンダードオリゴ合成

精製グレードから各種修飾まで、多様なご要望にお応えするオリゴDNA合成サービスです。

(税込) **¥44**/base
(税別 ¥40)

翌日または
翌々日のお届け*

6~160base

修飾品対応
リン酸化・ビオチン化 他

4つの精製グレード対応: Salt-Free / OPC / HPLC / PAGE

- * 10nmolスケール品 (税込) ¥44/base (精製料金別) <税別 ¥40/base>
日本全国翌日にお届け (~30base) 19時までのご注文 (~40base) および17時までのご注文 (~44base) は、エリア限定 (関東、北陸、近畿、中国、四国、九州地区) で翌日にお届け。
 - * 50nmolスケール品 (税込) ¥66/base (精製料金別) <税別 ¥60/base>
17時までのご注文 (~44base)、は関東エリアのみ翌日にお届けしています。
- ※ ご注文の納期は、鎖長や精製・修飾の有無によって異なりますので、ホームページをご確認ください。

HTSオリゴ合成

オリゴDNA合成48本以上でオトク。

(税込) **¥11**/base
(税別 ¥10)

最短
2営業日出荷

少量、多本数の合成に
コスパ良くお応え!

- 鎖長 6~70base、未修飾オリゴDNA合成のみ。
 - 96ウェルプレートとチューブ品の選択可。
- ※ 各種修飾品は受付けておりませんのでご注意ください。
※ Salt-Freeグレードは49baseまで対応可。

	10nmol合成スケール (1 OD)	50nmol合成スケール (3 OD)
Salt-Free	¥11/base (税込)	¥20/base (税込)
OPC精製	¥13/base (税込)	¥22/base (税込)

<税別 塩基単価> Salt-free(1 OD) ¥10, OPC(1 OD) ¥12, Salt-free(3 OD) ¥18, OPC(3 OD) ¥20

※記載は2021年4月現在の価格です。2021年4月1日からの総額表示(税込価格表示)義務化に伴い記載方法を変更いたしました。
税別価格を並記している場合がございますのでご注意ください。なお、価格は予告なく変更する場合がありますがご了承ください。

リアルタイムPCRプローブ合成

qPCRアプリケーション用の蛍光標識プローブ合成サービスです。
MGBプローブ、ダブル蛍光標識プローブ、QuickLC蛍光標識プローブの3合成ライン。
幅広いご要望にお応えして、多種類の蛍光標識組み合わせをご用意しています。

MGBプローブ
(税込) **¥33,000**/本~
<税別 ¥30,000~>

- ジェノタイピングや定量PCRによる発現量解析に最適なプローブです。
- 対応鎖長: 6~40bases、全てHPLC精製品
- 納品収量: 5, 20, 40nmole ● 出荷形状: 乾燥品 ● 納期: 2~3週間

Quick LC
ダブル蛍光標識プローブ
(税込) **¥18,480**/本~
<税別 ¥16,800~>

- 低価格& ご注文受付日+3営業日でお届けいたします。
- 15~40baseまで一律価格、
全てOPC精製品 3 O.D、乾燥品のご提供になります。
- 精製方法: OPC ● 納期: ご注文受付日+3営業日でお届け

ダブル蛍光標識プローブ
(税込) **¥22,000**/本~
<税別 ¥20,000~>

- 15~40baseまで一律の価格。
全てHPLC精製品 2 OD、乾燥品のご提供になります。
 - 精製方法: HPLC ● 納期: (国内合成品) ご注文受付日+6営業日でお届け
- ※ BHQ3選択の場合は海外合成品となりますので、別途お問い合わせください。